

Seziertisch mit Luftabsaugung STV 10/850 Höhenverstellbare Ausführung



Der Seziertisch steht auf einer Mittelsäule und ist von 750 - 1050 mm höhenverstellbar. Der Tisch ist komplett aus Edelstahl (Material Nr. 1.4301 - ANSI 304) gefertigt. Über eine 3-teilige, herausnehmbare, perforierte Arbeitsfläche werden alle gesundheitsschädlichen Gerüche sicher nach unten abgesaugt. Die Auflagefläche ist mit einem hohen umlaufenden Rand und einem Gefälle zum herausnehmbaren Restesieb ausgestattet. Ein nahtlos eingeschweißtes Organbecken 400 x 500 x 200 mm mit Standrohrventil, Siebeinsatz und umlaufendem Profilrand ist am Tischende angebracht. Unterhalb der perforierten Auflagefläche ist eine Wanne mit Gefälle zum Ablauf zu finden. Über ein integriertes Sprinklersystem ist eine permanente Reinigung des Tisches gewährleistet. Alle Energieanschlüsse sowie der Abluftanschluss verlaufen innerhalb der Mittelsäule und sind über eine Revisionsöffnung jederzeit gut erreichbar. Der Tisch ist an eine bauseitige Abluftanlage anzuschließen.

- Mittelsäule mit 2 Revisionsöffnungen
- Taster AUF/AB zur Höhenverstellung über einen eingebauten elektromechanischen Antrieb
- Kniehebelsmischbatterie für Kalt- und Warmwasser an der Mittelsäule
- 3 m Brauseschlauch inkl. schwerer Handbrause
- 2 Steckdosen in wassergeschützter Ausführung
- Regelventil für integrierte Sprinkleranlage
- 3-teilige Arbeitsplatte mit großem Restebecken/Siebeinsatz
- Elektro- und Wasserversorgung vorinstalliert
- Die Sicherheitseinrichtungen für Trinkwasser nach DIN 1988 Teil 4 sind bauseitig zu erfüllen

Technische Details auf der Rückseite

KUGEL Medizintechnik Vertriebs GmbH
Hermann-Köhl-Str. 2A
DE - 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



KUGEL
medical
■ ■ ■ ■

Seziertisch mit Luftabsaugung STV 10/850


Höhenverstellbare Ausführung

Technische Details:

Maße L/B/H:	2600 x 850 x 850 mm
Spannung:	230 Volt / 1 Ph / 50 Hz
Abluftmenge:	min. 1000 m ³ /h
Tragfähigkeit:	max. 200 kg
Material:	Geschliffenes Edelstahl (1.4301 - ANSI 304)
Typ:	STV 10/850
Artikel-Nr.:	010.010.850



Seziertisch mit Luftabsaugung STV 10/850

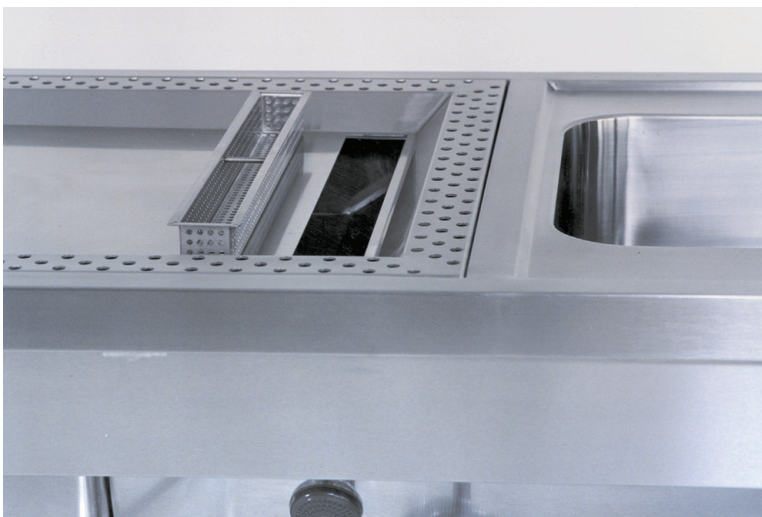

Herausnehmbares Restebecken / Siebeinsatz

KUGEL Medizintechnik Vertriebs GmbH
Hermann-Köhl-Str. 2A
DE – 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



KUGEL
medical
■ ■ ■ ■