

Autopsiesäge HB-740-Akku-250



Die oszillierende Autopsiesäge mit auswechselbaren Sägeblättern wird mit einem Akku geliefert. Durch den Wegfall des lästigen Netzkabels ist die Säge ideal für den mobilen Einsatz geeignet und unabhängig vom Stromnetz. Zum Sterilisieren kann der Sägekopf demontiert werden. Durch eine stufenlose Regelung kann die Schwingung des leistungsstarken Motors (250 Watt) exakt auf die jeweiligen Anforderungen eingestellt werden

Im Lieferumfang enthalten ist:

- 1 Stück Autopsiesäge HB -740-Akku
- 1 Stück rundes Sägeblatt ca. 50 mm Durchmesser
- 1 Stück Tiefensägeblatt schmal
- 1 Stück Tiefensägeblatt breit
- 1 Set Schlüsselpaar zum Auswechseln der Sägeblätter
- 1 Stück Ladegerät für Akku; 220-240 Volt, 50/60 Hz

Technische Details:

Spannung:	14,4 Volt
Motorleistung:	250 Watt
Schwingungen:	11000 – 18000 / min
Typ:	HB-740-Akku-250
Artikel Nr.	020.010.292

Zubehör siehe Rückseite

KUGEL medical GmbH & Co. KG
Hermann-Köhl-Str. 2a
DE - 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



Autopsiesäge HB-740-Akku-250




Kunststoffkoffer für Autopsiesäge HB 740-Akku-250
Typ: K-HB-740-Akku-250
Artikel Nr. 020.010.233




Schnell-Ladegerät
Typ: LG-HB-740-Akku-250
Artikel Nr. 020.030.069



Ersatz Akku
Typ: EA-HB-740-Akku-250
Artikel Nr. 020.010.296

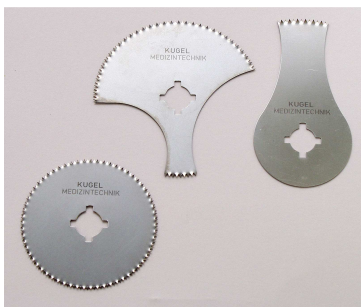

Sägeblätter für Autopsie Säge
Rundsägeblatt HB 50 Art. Nr. 020.010.215
Segmentsägeblatt HB 500 Art. Nr. 020.010.205
Tiefensägeblatt HB 502 Art. Nr. 020.010.210

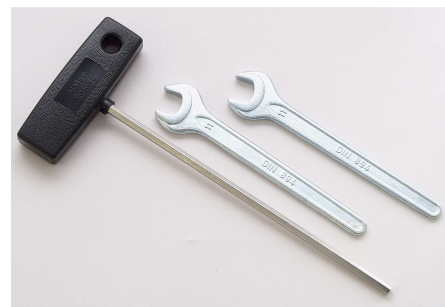

Ersatzschlüssel Set
Artikel Nr. 020.010.225

KUGEL medical GmbH & Co. KG
Hermann-Köhl-Str. 2a
DE - 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de

