

Färbetisch FT 850-AK-ULS - Steharbeitsplatz



Spezialarbeitstisch mit integrierter Luftabsaugung. Der Färbetisch ist mit einem eingebauten Abluftventilator sowie einem Aktivkohlesystem ausgestattet. Die Luft wird über die gesamte Arbeitsfläche nach unten abgesaugt und über einen Aktivkohlefilter sowie einen HEPA Filter zurück in den Raum geführt. Über dieses Umluftsystem werden alle gesundheitsschädlichen Dämpfe beseitigt und die MAK-Werte werden im gesamten Absaugbereich eingehalten. Komplette Konstruktion aus geschliffenem Edelstahl, stabilen selbsttragenden Unterbau mit verstellbaren Füßen. Sehr stabiles perforiertes Lochblech (wahlweise mit Ausstanzungen für Glasküvetten gegen Aufpreis) 3-seitiger Glasaufbau aus Makrolon mit Edelstahlrückwand um eine optimale Luftführung zu gewährleisten. Schallgedämmter Silent-Abluftventilator mit Betriebsstundenzähler. Herausnehmbarer Wasserbehälter mit ca. 0,8 Liter Inhalt.

Technische Details:

Maße B/T/H::	850 x 850 x 1750 mm
Luftgeschwindigkeit:	min. 0,4 m/sec an den perforierten Einlegeblechen
Material:	Geschliffenes Edelstahl (Material Nr. 1.4301 – ANSI 304)
Abwasseranschluss:	DN 50 (optional)
Spannung:	230 Volt / 1 Ph / 50
Typ:	FT-850-AK-ULS
Artikel-Nr.:	060.260.150

Weitere Informationen siehe Rückseite

KUGEL medical GmbH & Co. KG
Hermann-Köhl-Str. 2a
DE - 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



Färbetisch FT 850-AK-ULS - Steharbeitsplatz




Lochblechauflage mit Aussparung für Glasküvetten (Sonderlösung)

Optionales Zubehör:

Einhebelmischbatterie mit langem Auslauf

Typ: EHMB-300

Artikel Nr. 010.010.040

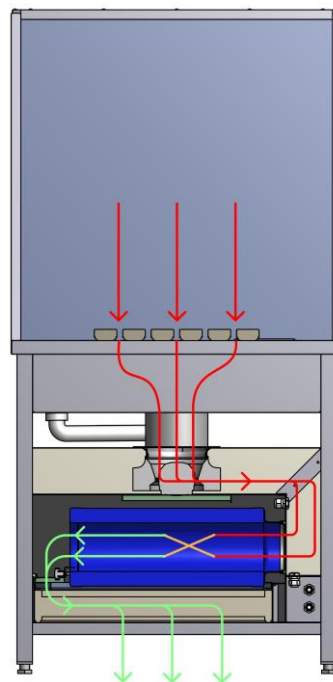

Ersatz Aktivkohle Filterpatrone

Typ: AKF-500-500/200

Artikel Nr. 060.260.026

Ersatz HEPA Filter

Typ: HEPA H13-305-610

Artikel Nr. 060.265.020

KUGEL medical GmbH & Co. KG
Hermann-Köhl-Str. 2a
DE - 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



KUGEL
medical