



**ACHTUNG! BRANDGEFAHR!
EXPLOSIONSGEFAHR!**

Lösungen zum richtigen
Umgang mit Gefahrstoffen

WE CREATE SOLUTIONS

KUGEL
medical
■ ■ ■ ■

ABGESAUGTE ARBEITSPLÄTZE IN VERSCHIEDENEN VARIANTEN






Keine Explosionsgefahr

ZENTRALE VER- UND ENTSORGUNGSEINHEITEN



Zum einfachen, schnellen und sicheren Entnehmen / Abfüllen von verschiedenen Medien wie Formalin, Xylol und Alkohol bieten wir ein zentrales Versorgungssystem mit mehreren Entnahmehähnen an. Frisches sowie gebrauchtes Material (Formalin/Alkohol/Xylol) lagert dabei in einem Ex-Schutzraum.

Kompakte Formalin-Dosierstationen für kleinere Labore:

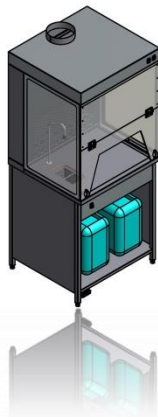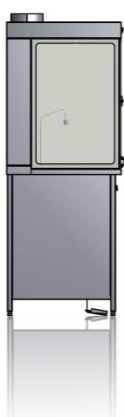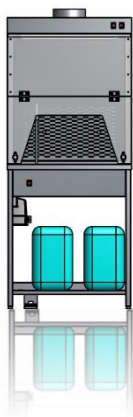

GEFAHRSTOFFE DAUERHAFT UND SICHER LAGERN



Lagerung von brennbaren Flüssigkeiten

Die feuerfesten Sicherheitsschränke sind dank des feuerhemmenden Dämmkerns insbesondere zur Lagerung von brennbaren Gefahrstoffen geeignet. Im Brandfall schließt die Schublade selbständig durch die integrierte Thermo-Auslösung.

Die Sicherheitsschränke sind in verschiedenen Ausführungen, Größen und Farben verfügbar. Optional sind zusätzlich Umluftfilteraufsätze zur sicheren technischen Entlüftung verfügbar.

COLOR UP YOUR LAB – Sicherheitsschränke zur dauerhaften Gefahrstofflagerung in verschiedenen Farben!



AUFSATZABSAUGUNGEN

FÜR DIE PATHOLOGIE



Wie in
Bamberg
gesehen!


Herausragende Eigenschaften im Überblick:

- komplett aus hochwertigem Edelstahl gefertigt
- 2 Standardgrößen verfügbar – weitere Größen auf Anfrage!
- geschlossenes System zur Montage auf vorhandene Arbeitsplätze
- Absaugung nach unten und zusätzlich nach hinten
- optimale Beseitigung aller gesundheitsschädlichen Dämpfe
- je nach Ausführung: Anschluss an bauseitige Abluft oder Betrieb über umweltfreundliche Aktivkohlefilter

JETZT Angebot anfordern...!

WE CREATE SOLUTIONS

KUGEL
medical
■ ■ ■ ■

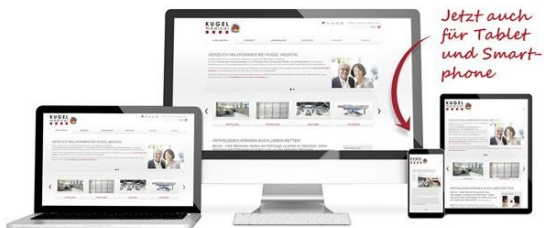

*Jetzt auch
für Tablet
und Smart-
phone*

*Weitere Informationen zu den hier
abgebildeten Lösungen finden Sie online unter
www.KUGEL-medical.de und in unseren
Katalogen!*

KUGEL medical GmbH & Co. KG | Hermann-Köhl-Strasse 2 A |
DE – 93049 Regensburg | Telefon: +49/941/208648-0 |
eMail: info@KUGEL-medical.de | www.KUGEL-medical.de