

Nasspräparateschrank NSP-RW-1600 – NSP RW-2400 mit Glasschiebetüren und Regalwägen RW-6



Die stabile Konstruktion ist komplett aus geschliffenem Edelstahl (Material Nr. 1.4301 – ANSI 304) gefertigt. Der Schrank wird ohne Boden geliefert, um das Einfahren mit den Regalwägen RW-6 zu erleichtern. Der Nasspräparateschrank ist mit 2 Glasschiebetüren aus Sicherheitsglas ESG ausgestattet. Der Freiraum unterhalb der Türe beträgt ca. 50 mm für die Luft. Der Schrank muss an die bauseitige Abluftanlage angeschlossen werden und ständig in Betrieb sein, da der Schrank keine Türdichtungen hat.

Im Lieferumfang enthalten sind 2 Stück Regalwagen RW-6 sowie 6 Stück Edelstahlbehältern. Die Regalwägen sind komplett aus Edelstahl (Material Nr. 1.4301 – ANSI 304) gefertigt und mit 4 Wandabweiserrollen und 4 Rädern d= 125 mm ausgestattet.

Technische Details:

Maße Schrank B/T/H:	1600 x 750 x 1990 mm
Maße Regalwagen B/T/H:	2 Stück - 715 x 535 x 1670 mm
Abluftmenge:	Min. 250 m ³ /h
Material:	Geschliffenes Edelstahl (1.4301 – ANSI 304)
Türen:	2 Stück ESG-Glasschiebetüren
Abluftanschluss:	2x DN 160
Typ:	NSP-RW-1600
Artikel-Nr.:	090.020.135

Weitere Modelle siehe Rückseite

KUGEL medical GmbH & Co. KG
Hermann-Köhl-Str. 2A
DE – 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de




KUGEL
medical
■ ■ ■ ■

Nasspräparateschrank NSP-RW-1600 – NSP RW-2400 mit Glasschiebetüren und Regalwägen RW-6

Modell NSP-RW-2400:

Maße Schrank B/T/H:	2400 x 750 x 1990 mm
Maße Regalwagen B/T/H:	3 Stück - 715 x 535 x 1670 mm
Abluftmenge:	Min. 400 m³/h
Material:	Geschliffenes Edelstahl (1.4301 – ANSI 304)
Türen:	3 Stück ESG-Glasschiebetüren
Abluftanschluss:	3x DN 160
Typ:	NSP-RW-2400
Artikel-Nr.:	090.020.140

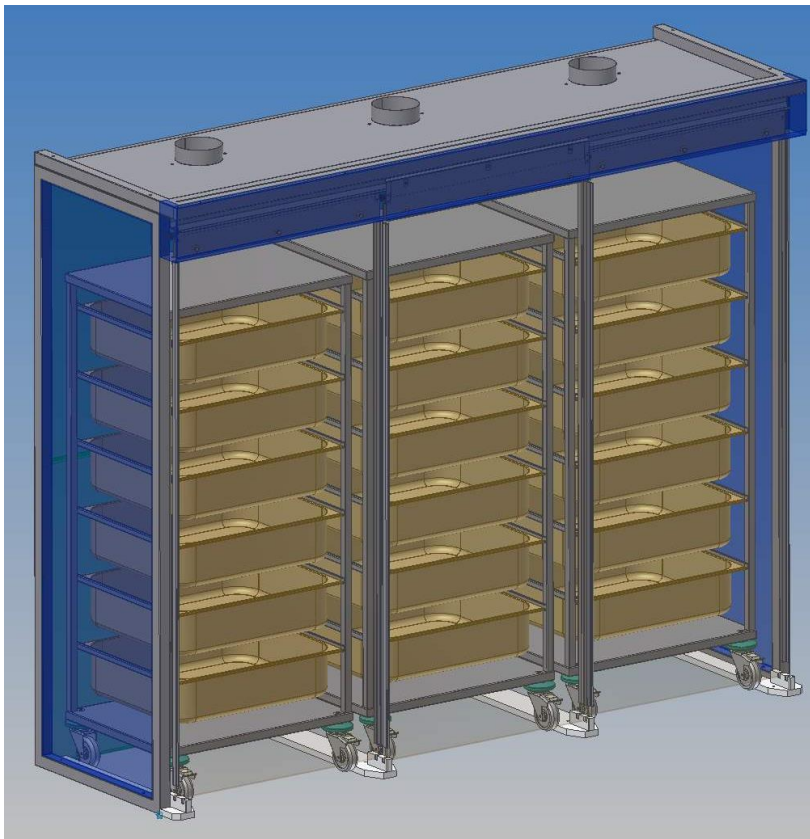

KUGEL medical GmbH & Co. KG
Hermann-Köhl-Str. 2A
DE – 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



KUGEL
medical
■ ■ ■ ■