


Seziertisch mit Luftabsaugung STV 10/100 – ROLL-IN – Dreh und Höhenverstellbar

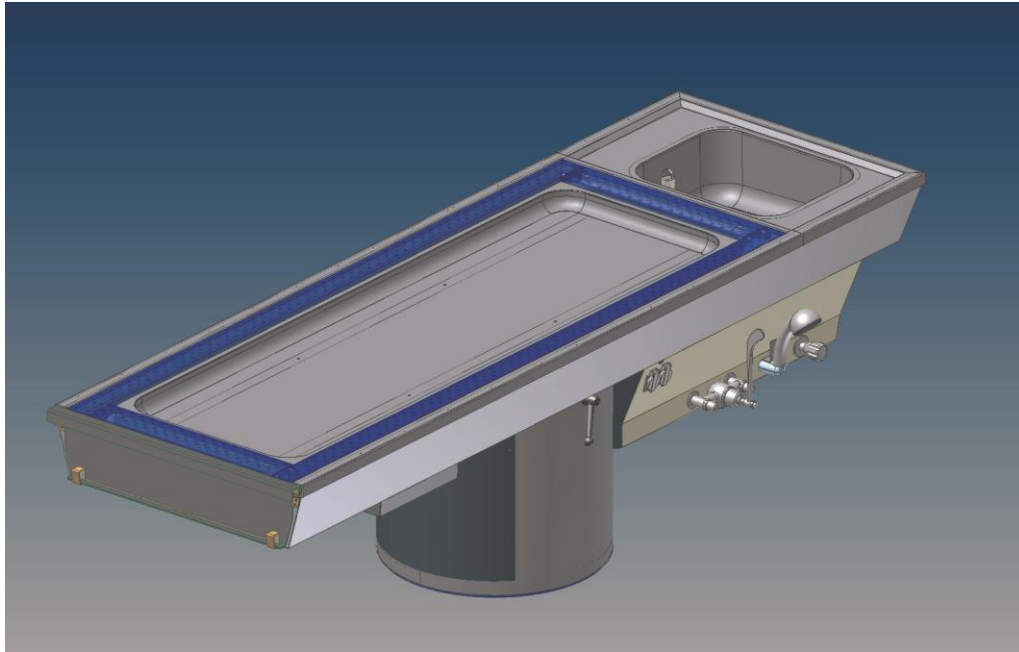

Seziertisch auf Mittelsäule drehbar nach links und rechts um je 180°, höhenverstellbar von 770 - 1070 mm. Seziertisch komplett aus Edelstahl (Werkstoff Nr. 1.4301 –ANSI 304) gefertigt. Über eine umlaufende perforierte Lochblechauflage werden alle gesundheitsschädlichen Gerüche sicher nach unten abgesaugt. An der schmalen Seite des Tisches wird eine Leichenmulde eingeschoben und mit einer Klappe selbständig verschlossen. Die Auflagefläche ist mit einem hohen umlaufenden Rand sowie mit einem Gefälle zum Restesieb (ebenfalls herausnehmbar) ausgestattet. Ein nahtlos eingeschweißtes Organbecken mit umlaufendem Profilrand ist am Tischende angebracht. Wasserfeste Antidröhnunterleimung der Tischplatte. Unterseite komplett geschlossen. Mittelsäule mit Revisionsöffnung. Alle Versorgungsmedien verlaufen innerhalb der Mittelsäule. Über ein integriertes Sprinklersystem ist eine permanente Reinigung des Tisches gewährleistet. Alle Energieanschlüsse sowie der Abluftanschluss sind innerhalb des Sockels eingebaut. Der Tisch ist an eine bauseitige Abluftanlage anzuschließen, Abluftmenge min. 1000 m³/h.

Der Seziertisch STV 10/100 Roll-in enthält die folgenden Merkmale:

- Taster AUF/AB zur Höhenverstellung (Höhenverstellung erfolgt mittels eines eingebauten elektromechanischen Antrieb)
- Schnellspanngriff zur Fixierung der Drehbewegung
- Kniehebelsmischbatterie für Kalt- und Warmwasser
- 3 m Brauseschlauch inkl. Handbrause
- 2 Steckdosen in wassergeschützter Ausführung
- Elektro- und Wasserversorgung vorinstalliert
- Die Sicherheitseinrichtungen für Trinkwasser nach DIN 1988 Teil 4 bzw. EN DIN 1717 sind bauseitig zu erfüllen
- Leichenmulde LM 80/100-AL nicht im Lieferumfang enthalten


Technische Details auf der Rückseite

KUGEL medical GmbH & Co. KG
Hermann-Köhl-Str. 2a
DE - 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



Seziertisch mit Luftabsaugung STV 10/100 – ROLL-IN – Dreh und Höhenverstellbar

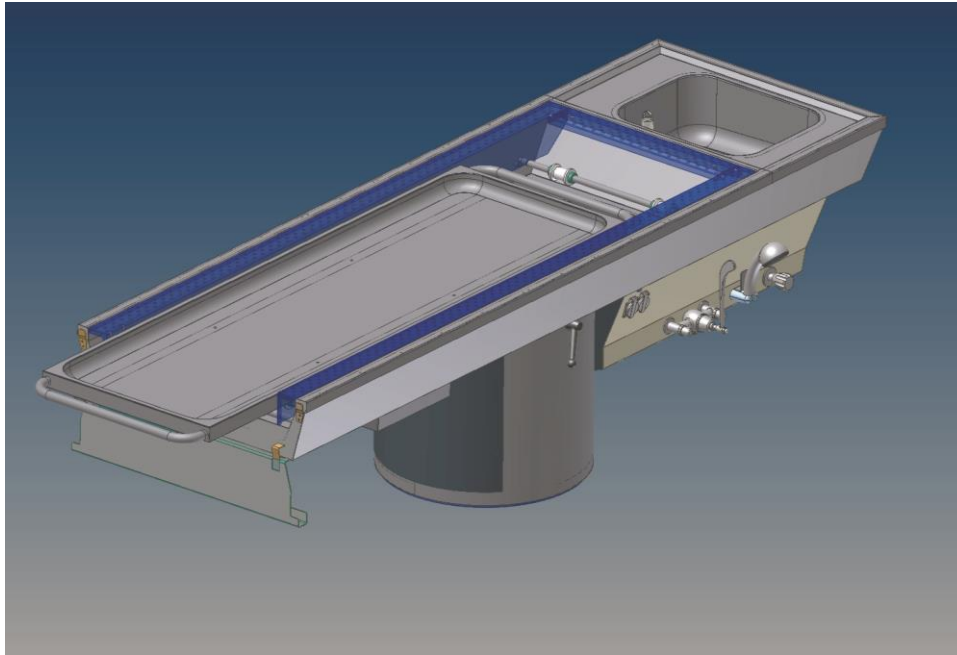

Technische Details:

Maße L/B/H:	2656 x 850 x 770/1070 mm
Spannung:	230 Volt/1PH/50Hz
Hub-Tragfähigkeit:	300 kg
Typ:	STV 10/100-Roll-in
Artikel-Nr.:	010.010.880
Optional 450 kg Hub-Tragkraft gegen Aufpreis erhältlich – Artikel-Nr.: 010.010.858	

KUGEL medical GmbH & Co. KG
Hermann-Köhl-Str. 2a
DE - 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de

