

Seziertisch mit Luftabsaugung STV 10/800

Feststehende Ausführung



Der Seziertisch ist komplett aus Edelstahl (Material Nr. 1.4301 – ANSI 304) gefertigt. Über eine 3-teilige, herausnehmbare, perforierte Arbeitsfläche werden alle gesundheitsschädlichen Gerüche sicher nach unten abgesaugt. Die Auflagefläche ist mit einem hohen umlaufenden Rand und einem Gefälle zum herausnehmbaren Restesieb hin ausgestattet. Ein nahtlos eingeschweißtes Organbecken 400 x 500 x 200 mm mit Standrohrventil, Siebeinsatz und umlaufendem Profilrand ist am Tischende angebracht. Unterhalb der perforierten Auflagefläche ist eine Wanne mit Gefälle zum Ablauf zu finden. Über ein integriertes Sprinklersystem ist eine permanente Reinigung des Tisches gewährleistet. Alle Energieanschlüsse sowie der Abluftanschluss verlaufen innerhalb der Mittelsäule und sind über eine Revisionsöffnung jederzeit gut erreichbar. Der Tisch ist an eine bauseitige Abluftanlage anzuschließen.

Der Seziertisch STV 10/800 enthält folgende Merkmale:

- Mittelsäule mit 2 Revisionsöffnungen
- Kniehebelsmischbatterie für Kalt- und Warmwasser an der Mittelsäule
- 3 m Brauseschlauch inkl. Schwerer Handbrause
- 2 Steckdosen in wassergeschützter Ausführung
- Regelventil für integrierte Sprinkleranlage
- 3-teilige Arbeitsplatte mit großem Restebecken / Siebeinsatz
- Elektro- und Wasserversorgung vorinstalliert
- Die Sicherheitseinrichtungen für Trinkwasser nach DIN 1988 Teil 4 bzw. EN DIN 1717 sind bauseitig zu erfüllen

Technische Details auf der Rückseite

KUGEL medical GmbH & Co. KG
Hermann-Köhl-Str. 2a
DE - 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de




Seziertisch mit Luftabsaugung STV 10/800

Feststehende Ausführung



Seziertisch mit Luftabsaugung STV 10/850

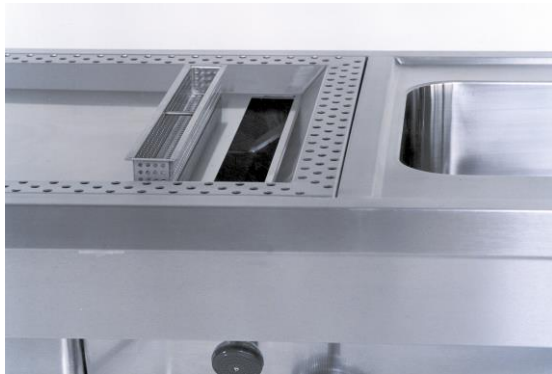

Herausnehmbares Restebecken / Siebeinsatz

Technische Details:

Maße L/B/H:	2600 x 850 x 850 mm
Spannung:	230 Volt / 1 Ph / 50 Hz
Abluftmenge:	min. 1000 m ³ /h
Hub-Tragkraft:	300 kg
Material:	Geschliffenes Edelstahl (1.4301 – ANSI 304)
Typ:	STV 10/800
Artikel-Nr.:	010.010.800

Optional 450 kg Hub-Tragkraft gegen Aufpreis erhältlich – Artikel-Nr.: 010.010.858

KUGEL medical GmbH & Co. KG
Hermann-Köhl-Str. 2a
DE - 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de

