

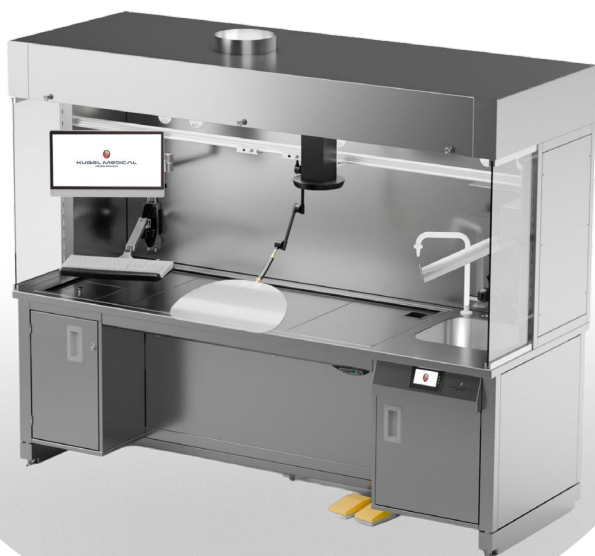
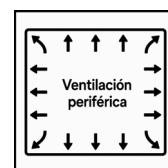
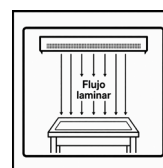


Mesa de macroscopía con difusor integrado de flujo laminar **Modelo WMT 2250-E-BTR**

FP001068 | 060.300.210

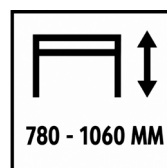

Estación de macroscopía mural equipada con un sistema de ventilación de flujo laminar para garantizar una protección óptima del operador frente a la exposición a vapores químicos durante la manipulación y el examen de las muestras.

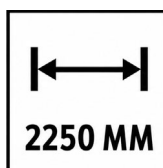

Especificaciones técnicas

- Dimensiones: **2250 x 850 x 2100 mm**
- Ajuste eléctrico de la altura de trabajo: **780 - 1060 mm**
- Superficie de trabajo en **acero inoxidable 316** | Estructura en **acero inoxidable 304**.
- **Difusor integrado de flujo laminar** (conectable)
- **Iluminación LED** regulable de 4000 K
- **Ventilación periférica** alrededor del espacio de trabajo
- **Ventilación por aspiración posterior** detrás de la cubeta
- Superficie de trabajo compuesta por **una placa desmontable no perforada**
- **Cubeta soldada sin juntas de 400 x 400 x 200 mm x 3 ½ "** situada en el lado derecho
- Grifo mezclador AC/AF con ducha extensible (1,50 m)
- **Panel de control HMI con pantalla táctil de 3"** para la gestión del caudal de aire (ENCENDIDO / APAGADO), la iluminación, la monitorización del nivel de formalina y el sistema de enjuague
- **Sistema de enjuague continuo integrado** debajo de la superficie de trabajo, controlado mediante la pantalla táctil
- Fregadero (120 x 120 mm) **para eliminación de formol, con sensor de nivel integrado y alarma audiovisual mostrada a través de la pantalla táctil - bidón de 10 L**
- **Contenedor de residuos de plástico ventilado de 25 L** con tapa abatible hacia el lado izquierdo

- **Riel médico** para fijación de accesorios
- **Patas regulables** para garantizar la perfecta estabilidad de la mesa
- 4 x **tomas eléctricas IP44** con tapa abatible
- 4 x **tomas LAN**
- Alimentación eléctrica: **230 V / 50 Hz / 1P / 16 A**
- Conexión del conducto de extracción situada frente al fregadero, con opciones alternativas de conexión en la parte trasera de la estación (conexión a pared) o a través de la parte inferior de la estación (conexión al suelo)
- Suministro de aire: **aprox. 800 m³/h** | Ø 250 mm | Pérdida de carga: 50 Pa
- Extracción de aire: **aprox. 1050 m³/h** | Ø 280 mm | Pérdida de carga: 120 Pa

Accesorios compatibles



Sistema de dispensación de formol mediante pedal con accionamiento eléctrico

FP000882 | 060.300.001




Pedal de control para la distribución de agua

FP000661 | 060.300.013




Panel lateral fijo de vidrio de seguridad, situado en el lado derecho o izquierdo de la estación

FP001136 | 060.300.023

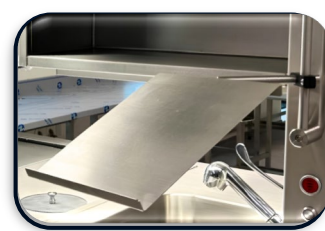


Soporte ajustable para documentos

FP000657 | 060.300.002

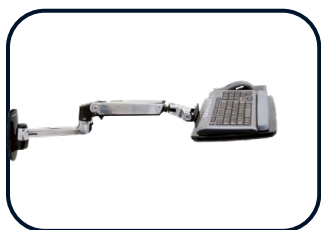

Soporte ajustable para teclado y ratón (max. 2 kg)

FP001086 | 060.300.003

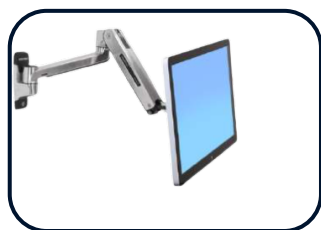


Soporte ajustable para monitor (max. 11 kg)

FP001085 | 060.300.004



Soporte de cámara con brazo articulado y carro de fijación (max. 1,5 kg)

FP001115 | 060.300.019

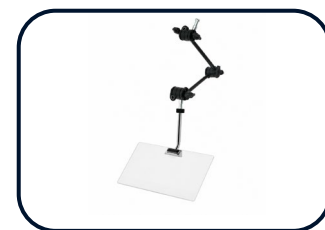

Pantalla de protección contra salpicaduras con brazo articulado

FP000659 | 060.300.006



Grifo con sensor
infrarrojo

FP001093 | 060.300.017



Triturador de residuos

FP001092 | 060.300.005




Lámpara lupa con
iluminación LED

FP001087 | 060.300.008



Ducha lavaojos extensible

FP001091 | 060.300.009

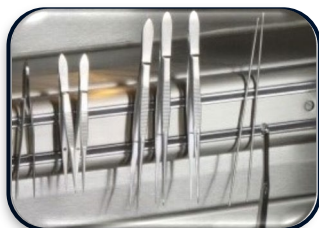

Barra magnética para
instrumentos – longitud
500 mm

FP001090 | 060.300.024



Portavasos (Ø 20 mm)

FP001096 | 060.300.016




Dispensador de papel
absorbente

FP000658 | 060.300.010



Dispensador de
guantes – 1 talla

FP001118 | 060.300.020

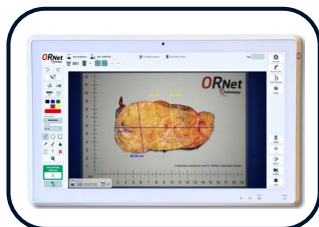

Sistema de
documentación de
muestras ORNet

Bajo pedido

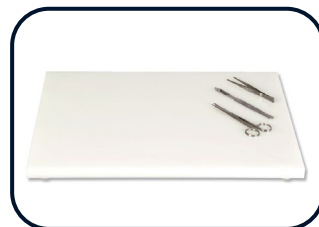


Tabla de corte, blanca,
equipada con cuatro
pequeños pies antideslizantes

Material: Polietileno

Dimensiones (L/A/H):
300 x 400 x 35 mm

MC002638 | 060.012.011

Dimensiones (L/A/H):
500 x 400 x 35 mm

MC002637 | 060.012.010

Dimensiones (L/A/H):
600 x 400 x 35 mm

MC002636 | 060.019.010



Tabla de corte, azul, equipada
con cuatro pequeños pies
antideslizantes

Material: Polietileno

Dimensiones (L/A/H):
500 x 400 x 35 mm

MC002635 | 060.012.119

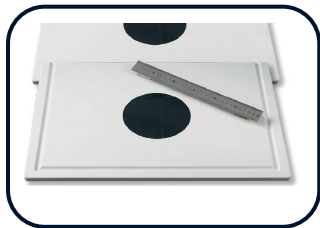


Tabla de corte con ranura y punto central negro de referencia, equipada con cuatro pequeños pies antideslizantes

Material: Corian

Dimensiones (L/A/H):
500 x 400 x 30 mm

MC002633 | 060.012.002



Tabla de corte con ranura, equipada con cuatro pequeños pies antideslizantes

Material: Corian

Dimensiones (L/A/H):
500 x 400 x 30 mm

MC002634 | 060.012.003



Tabla de corte con punto central negro de referencia y regla de 30 cm

Material: Nabolen 500 (PEAD)

Dimensiones (L/A/H):
400 x 300 x 25 mm

FP000655 | 060.300.015