

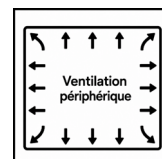
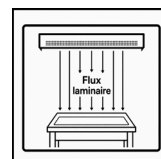


Table de macroscopie avec diffuseur à flux laminaire intégré **Modèle WMT 1500-E-BTR**

FP001072 | 060.300.180

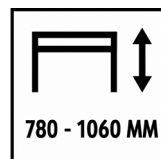

Station de macroscopie type murale dotée d'un système de ventilation à flux laminaire pour assurer une protection optimale de l'opérateur contre l'exposition aux vapeurs chimiques lors de la manipulation et de l'examen des prélèvements.

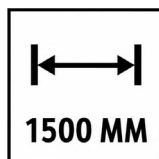

Spécifications techniques

- Dimensions: **1500 x 850 x 2100 mm**
- Réglage électrique de la hauteur de travail : **780 - 1060 mm**
- Surface de travail en **inox 316** | Piètement en **inox 304**.
- **Diffuseur à flux laminaire intégré** (raccordable)
- **Eclairage LED 4000K intégré** à intensité variable
- **Ventilation périphérique** autour de l'espace de travail
- **Dosseret aspirant** derrière le bac
- Surface de travail constitué d'une **plaque amovible non perforée**
- **Bac embouti de 400 x 400 x 200 mm x 3 ½ "** situé sur le côté droit
- Robinet mitigeur EC/EF avec douchette extensible (1,50 m)
- **Panneau de commande HMI à écran tactile de 3"** pour la gestion du débit d'air (MARCHE / ARRÊT), de l'éclairage, du contrôle du niveau de formol et du système de rinçage
- **Système de rinçage permanent** sous le plan de travail, commandé via l'écran tactile
- Évier (120 x 120 mm) pour **élimination du formol avec capteur de niveau intégré et alarme audiovisuelle affichée sur l'écran tactile** - bidon de **10 L**
- **Poubelle en plastique ventilée de 25 L** avec couvercle pivotant sur le côté gauche

- **Rail medical** pour fixation d'accessoires
- **Pieds réglables** pour une parfaite stabilité de la table
- 4 x **prises électriques IP 44** avec clapet
- 1 x **prises LAN**
- Alimentation électrique: **230 V / 50 Hz / 1P / 16 A**
- Raccordement à la gaine d'extraction en partie basse côté opposé à l'évier, avec des possibilités de raccordement alternatives à l'arrière de la station (raccordement mural) ou par le dessous de la station (raccordement au sol)
- Approvisionnement en air : **environ 540 m³/h** | Ø : 200 mm | Perte de charge: 50 PA
- Extraction d'air : **environ 750 m³/h** | Ø : 250 mm | Perte de charge: 120 PA

Accessoires compatibles



Système de distribution de formol via pédale à commande électrique

FP000882 | 060.300.001




Pédale de commande pour la distribution d'eau

FP000661 | 060.300.013




Panneau latéral fixe en verre de sécurité, situé à gauche ou à droite de la station

FP001136 | 060.300.023

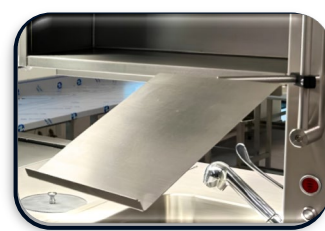


Support réglable pour documents

FP000657 | 060.300.002

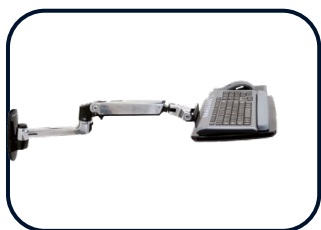

Support réglable pour clavier et souris (max. 2 kg)

FP001086 | 060.300.003

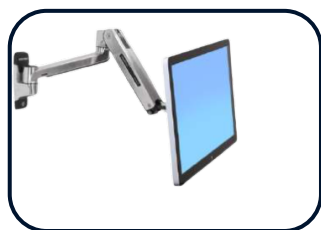


Support réglable pour écran (max. 11 kg)

FP001085 | 060.300.004



Support de caméra avec bras articulé et chariot de fixation (max. 1,5 kg)

FP001115 | 060.300.019

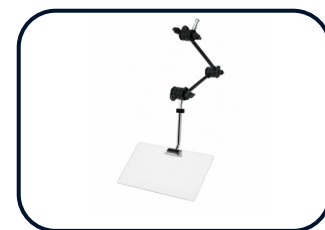

Vitres pare-projections sur bras articulé

FP000659 | 060.300.006



Robinet à capteur
infrarouge

FP001093 | 060.300.017



Broyeur de déchets
intégré sous le bac évier

FP001092 | 060.300.005




Lampe loupe avec
éclairage LED

FP001087 | 060.300.008



Douchette lave-yeux
extensible

FP001091 | 060.300.009

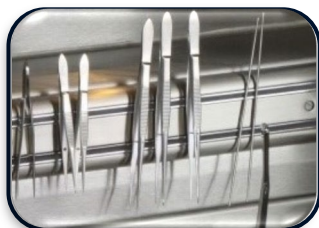

Barre magnétique pour
instruments - Longueur
500 mm

FP001090 | 060.300.024



Porte tube (Ø 20 mm)

FP001096 | 060.300.016




Distributeur de papier
absorbant

FP000658 | 060.300.010



Distributeur de gants -
1 taille

FP001118 | 060.300.020

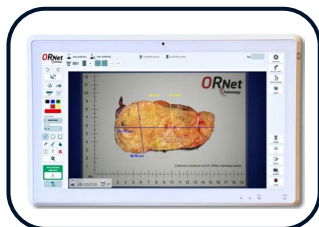

Système de
documentation des
prélèvements ORNet

Sur demande

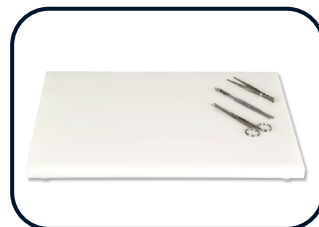


Planche à découper,
blanche, munie de quatre
petits pieds antidérapants

Matériaux: Polyéthylène

Dimensions (L/I/H):
300 x 400 x 35 mm

MC002638 | 060.012.011

Dimensions (L/I/H):
500 x 400 x 35 mm

MC002637 | 060.012.010

Dimensions (L/I/H):
600 x 400 x 35 mm

MC002636 | 060.019.010



Planche à découper,
bleue, munie de quatre
petits pieds antidérapants

Matériaux: Polyéthylène

Dimensions (L/I/H):
500 x 400 x 35 mm

MC002635 | 060.012.119

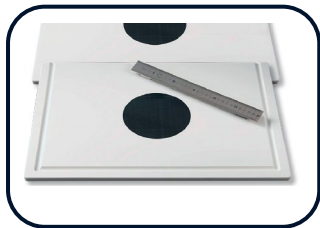


Planche à découper avec rainure, point central noir de repérage, munie de quatre petits pieds antidérapants

Matériaux: Corian

Dimensions (L/I/H):
500 x 400 x 30 mm

MC002633 | 060.012.002



Planche à découper avec rainure, munie de quatre petits pieds antidérapants

Matériaux: Corian

Dimensions (L/I/H):
500 x 400 x 30 mm

MC002634 | 060.012.003



Planche à découper avec point central noir de repérage et règle de 30 cm

Matériaux: Nabolen 500 (PE-HD)

Dimensions (L/I/H):
400 x 300 x 25 mm

FP000655 | 060.300.015