

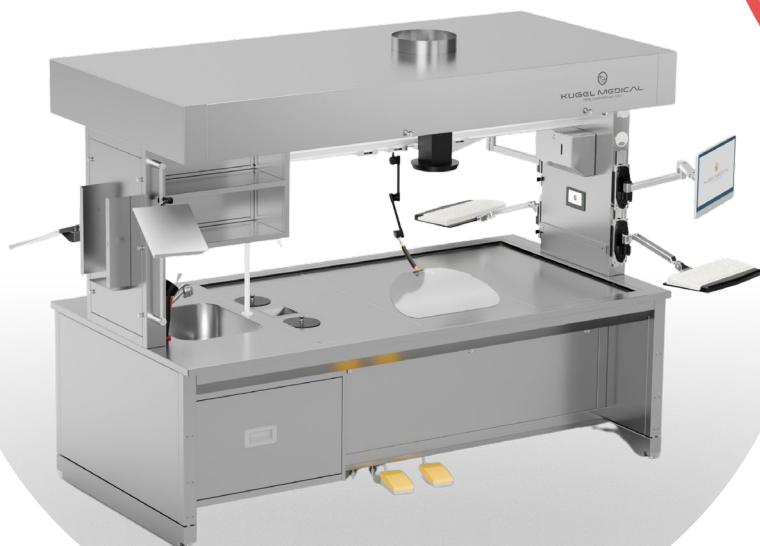
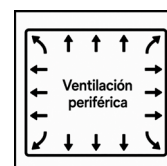
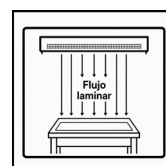


Mesa de macroscopía con difusor integrado de flujo laminar **Modelo GSI 2400-E**

FP001080 | 060.400.241

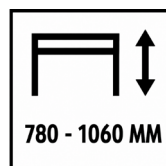

Estación de macroscopía tipo isla equipada con un sistema de ventilación de flujo laminar para garantizar una protección óptima del operador frente a la exposición a vapores químicos durante la manipulación y el examen de muestras.

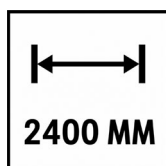

Especificaciones técnicas

- Dimensiones: **2400 x 1200 x 2300 mm**
- **Ajuste eléctrico** de la altura de trabajo: **780 - 1060 mm**
- Superficie de trabajo en **acero inoxidable 316** | Estructura en **acero inoxidable 304**.
- **Difusor integrado de flujo laminar**
- Con **iluminación LED regulable** de 4000 K
- **Ventilación periférica** alrededor del espacio de trabajo
- Superficie de trabajo compuesta por **3 placas desmontables no perforadas**
- Cubeta embutida **500 x 400 x 200 mm x 3 ½"** accesible por ambos lados de la mesa con tubo de rebose
- Grifo mezclador AC/AF con ducha extensible (1,50 m)
- **Panel de control HMI con pantalla táctil** de 3" para la gestión del caudal de aire (ENCENDIDO / APAGADO), la iluminación, la monitorización del nivel de formalina y el sistema de enjuague
- **Sistema de enjuague permanente** bajo la superficie de trabajo, controlado mediante la pantalla táctil
- **Fregadero (120 x 120 mm)** para eliminación de formol con sensor de nivel integrado y alarma audiovisual mostrada a través de la pantalla táctil - **bidón de 10 L**
- 2 x **contenedores de residuos ventilados** de 25 L con tapa | Ø 142 mm

- **Patas regulables** para garantizar la perfecta estabilidad de la mesa
- **Riel médico** para fijación de accesorios
- **Estantes de almacenamiento** sobre la cubeta fregadero
- **6 x tomas eléctricas IP44**
- **4 x tomas LAN**
- Alimentación eléctrica: **230 V / 50 Hz / 1P / 16A**
- Conexión al conducto de extracción en la parte inferior lado opuesto al fregadero
- Suministro de aire: **aprox. 1000 m³/h** | Ø 280 mm | Pérdida de carga: 50 Pa
- Extracción de aire: **aprox. 1100 m³/h** | Ø 315 mm | Pérdida de carga: 120 Pa

Accesorios compatibles



Sistema de dispensación de formol mediante pedal con accionamiento eléctrico

FP000882 | 060.300.001




Pedal de control para la distribución de agua

FP000661 | 060.300.013



Soporte ajustable para documentos

FP000657 | 060.300.002

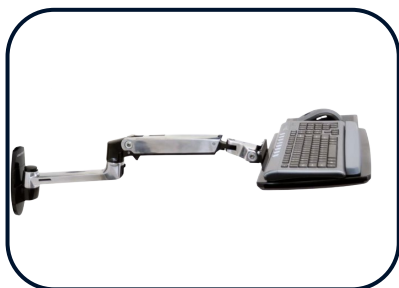

Soporte ajustable para teclado (max. 2 kg)

FP001086 | 060.300.003



Soporte ajustable para monitor (max. 11 kg)

FP001085 | 060.300.004



Soporte de cámara con brazo articulado y carro de fijación (max. 1,5 kg)

FP001115 | 060.300.019



Pantalla de protección contra salpicaduras con brazo articulado

FP000659 | 060.300.006



Triturador de residuos

FP001092 | 060.300.005



Lámpara lupa con iluminación LED

FP001087 | 060.300.008




Ducha lavaojos extensible

FP001091 | 060.300.009



Grifo con sensor infrarrojo

FP001093 | 060.300.017

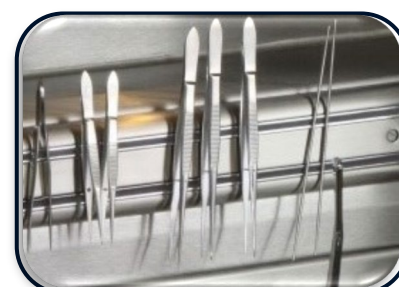

Barra magnética para instrumentos – longitud 300 mm

FP001089 | 060.300.011



Portavasos (Ø 20 mm)

FP001096 | 060.300.016



Dispensador de papel absorbente

FP000658 | 060.300.010



Dispensador de guantes – 1 talla

FP001088 | 060.300.014

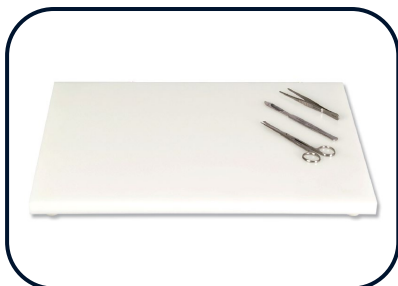


Tabla de corte, blanca,
equipada con cuatro pequeños
pies antideslizantes

Material: Polietileno
Dimensiones (L/A/H):
300 x 400 x 35 mm

MC002638 | 060.012.011

Dimensiones (L/A/H):
500 x 400 x 35 mm

MC002637 | 060.012.010

Dimensiones (L/A/H):
600 x 400 x 35 mm

MC002636 | 060.019.010



Tabla de corte, azul, equipada
con cuatro pequeños pies
antideslizantes

Material: Polietileno
Dimensiones (L/A/H):
500 x 400 x 35 mm

MC002635 | 060.012.119



Tabla de corte con ranura,
equipada con cuatro pequeños
pies antideslizantes

Material: Corian
Dimensiones (L/A/H):
500 x 400 x 30 mm

MC002634 | 060.012.003



Tabla de corte con ranura y punto
central negro de referencia, equipada
con cuatro pequeños pies
antideslizantes

Material: Corian
Dimensiones (L/A/H):
500 x 400 x 30 mm


MC002633 | 060.012.002



Tabla de corte con punto
central negro de referencia y
regla de 30 cm

Material: Nabolon 500 (PEAD)
Dimensiones (L/A/H):
400 x 300 x 25 mm

FP000655 | 060.300.015

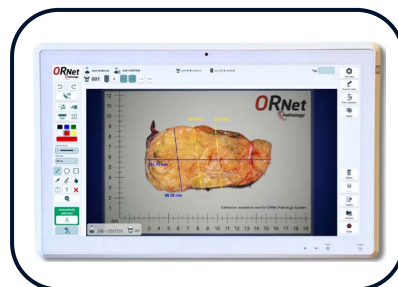

Sistema de documentación de
muestras ORNet

Bajo pedido